



Invacare® Cascata

H720T4C

en	Mobile Toilet Chair User Manual	3
de	Mobiler Toilettenstuhl Gebrauchsanweisung	5
fr	Chaise toilette mobile Manuel d'utilisation	9
it	Sedia da toilette mobile Manuale d'uso	12
es	Silla de inodoro móvil Manual del usuario	15
pt	Cadeira sanitária móvel Manual de utilização	18
nl	Mobiele toiletstoel Gebruiksaanwijzing	21



This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, this manual MUST be read and saved for future reference.



Yes, you can.®

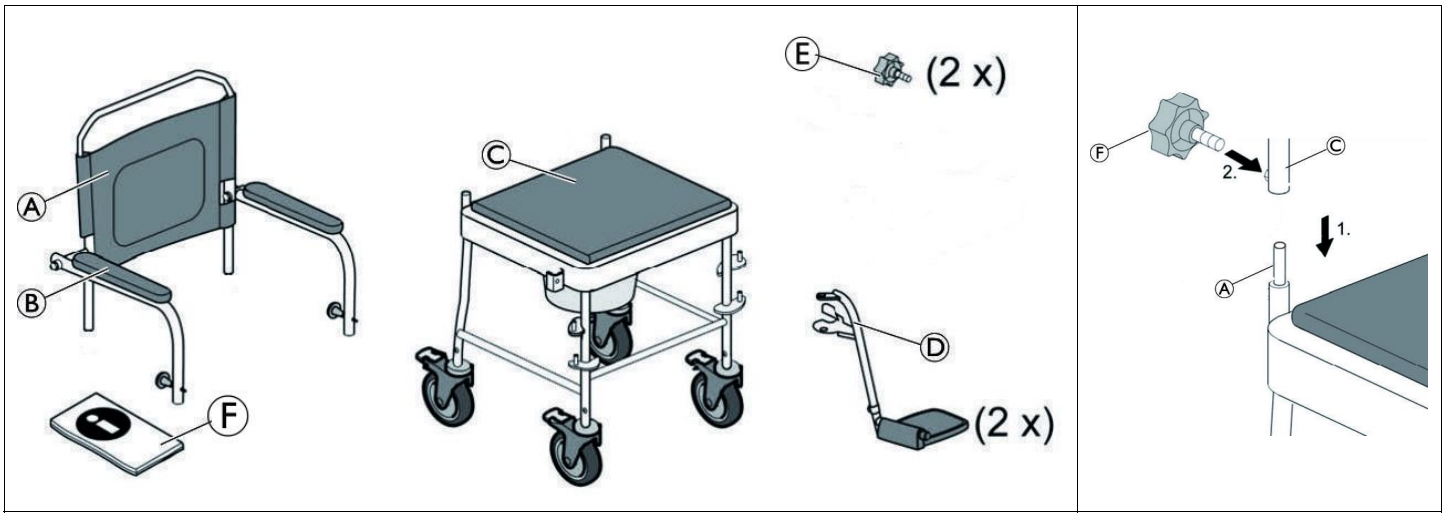


Fig. 1

Fig. 2

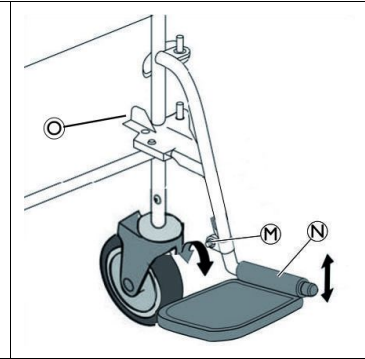
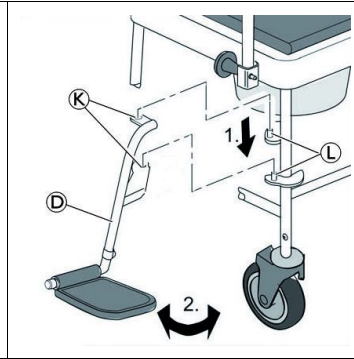
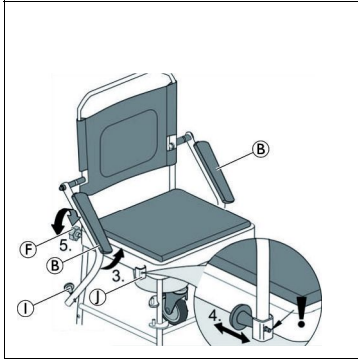


Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

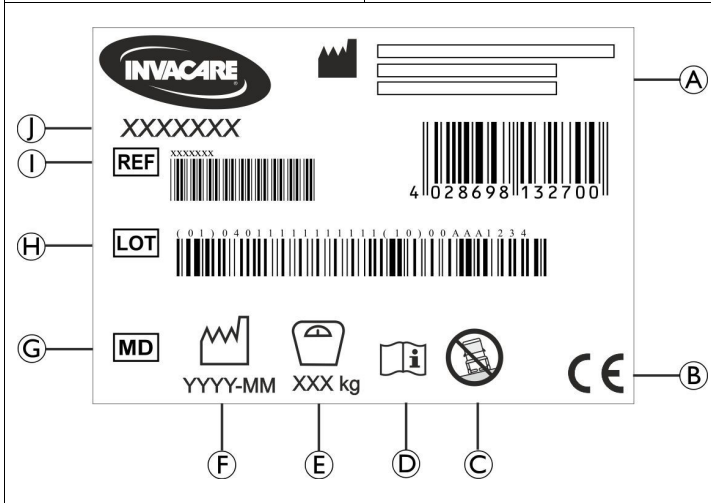


Fig. 6

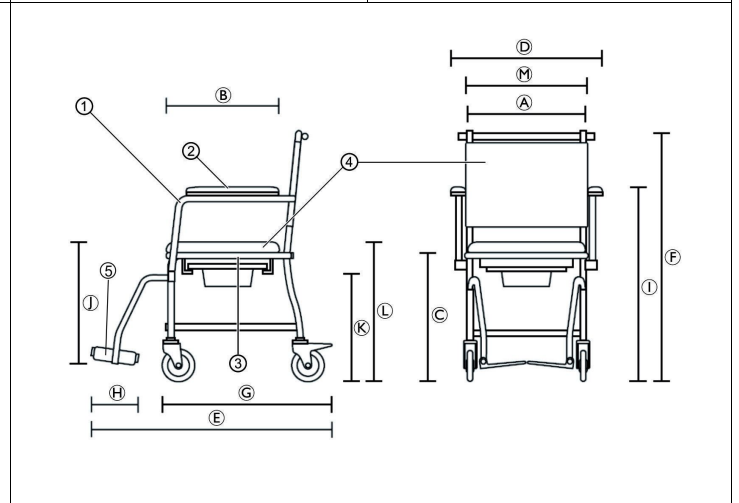


Fig. 7

1 Introduction

This user manual contains important information about the handling of the product. To ensure safety when using the product, read the user manual carefully and follow the safety instructions.

Invacare reserves the right to alter product specifications without further notice.

Before reading this document, make sure you have the latest version. You find the latest version as a PDF on the Invacare website.

If you find that the font size in the printed document is difficult to read, you can download the PDF version from the website. The PDF can then be scaled on screen to a font size that is more comfortable for you.

In case of a serious incident with the product, you should inform the manufacturer and the competent authority in your country.

2 Warranty Information

We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance with our General Terms and Conditions of Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider from whom the product was obtained.

3 Compliance

Quality is fundamental to the company's operation, working within the disciplines of ISO 13485.

This product features the CE mark, in compliance with the Medical Device Regulation 2017/745 Class I. The launch date of this product is stated in the CE declaration of conformity.

We are continuously working towards ensuring that the company's impact on the environment, locally and globally, is reduced to a minimum.

We only use REACH compliant materials and components.

3.1 Product-specific Standards

The product has been tested and conforms to EN 12182 (Assistive products for persons with disability) and related standards. For further information about local standards and regulations, contact your local Invacare representative. See addresses at the end of this document.

4 Service Life

The expected service life of this product is three years when used daily and in accordance with the safety instructions, maintenance intervals and correct use, stated in this manual. The effective service life can vary according to frequency and intensity of use.

5 Limitation of Liability

Invacare accepts no liability for damage arising from:

- Non-compliance with the user manual
- Incorrect use
- Natural wear and tear
- Incorrect assembly or set-up by the purchaser or a third party
- Technical modifications
- Unauthorised modifications and/or use of unsuitable spare parts

6 Safety

6.1 Safety Information



WARNING!

Risk of Serious Injury or Damage

Improper use of this product may cause injury or damage.

- If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a health care professional or provider before attempting to use this equipment.
- Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as user manual, service manual or instruction sheet supplied with this product or optional equipment.



WARNING!

Risk of Falling!

- Do not use if defective.
- Do not make any unauthorized alterations or modifications to the product.
- Do not use in shower.
- Keep product away from open flames.
- Do not place smoldering cigarettes on the product.
- Do not stand on this product.
- Do not use as a climbing aid.
- Do not lift the product when under load.
- Only use the toilet chair on a level ground and indoors.



WARNING!

Risk of Tipping!

- Never stand on the footrests.
- Do not lean excessively forwards.



CAUTION!

Risk of Burning Skin!

The product components can heat up when exposed to external sources of heat.

- Do not expose the product to direct sunlight before use.



WARNING!

- Before first use, clean the product thoroughly.
- Before every use, check the product for damage and ensure that it is securely assembled.



CAUTION!

Risk of Injury


Non-original or wrong parts may affect the function and safety of the product.

- Only use original parts for the product in use.
- Due to regional differences, refer to your local Invacare catalog or website for available options or contact your Invacare distributor. See addresses at the end of this document.

6.2 Labels and Symbols on the Product (Fig. 6)

(A)	Manufacturer	(F)	Production date
(B)	European Conformity	(G)	Medical Device

Ⓒ	For use on level ground only	Ⓗ	Lot number
Ⓓ	Read user manual	Ⓛ	Reference number
Ⓔ	Maximum user weight	Ⓜ	Product designation

 The identification label is attached to the left rear tube of the product.

7 Product Description

Invacare Cascata H720T4C is a mobile toilet chair composed of flip down plastic padded armrests, a padded backrest, with swing-away footrest, a padded seat plate with toilet cut-out and with four braked castors. A toilet pan with lid can be placed under the seat.

8 Scope of Delivery (Fig. 1)

- Ⓐ Backrest
- Ⓑ Armrest (2x) (preassembled)
- Ⓒ Seat frame with swivel castors and toilet pan holder with toilet pan
- Ⓓ Footrest (2x)
- Ⓔ Star head screw (2x)
- Ⓕ User manual

9 Intended Use

This product is intended to be used as a toilet aid providing stable seating position while going to the toilet.

Users are any adults and adolescents with restricted or limited mobility (e.g.: legs and/or hips). If used without an assistant, the users must be able to keep their own balance.

Indication

Restricted or limited mobility (e.g.: legs and/or hips) or having balance issues to stand up or walk due to transitional or permanent disabilities.

There are no contraindications known when using the product as intended.

The maximum user weight: 130 kg

10 Assembling the Product (Fig. 2 — 5)



CAUTION!
Risk of Trapping
– Take care during assembly.

1. Guide the backrest tube Ⓒ on both sides, from the top onto the seat frame. (Fig 2) Ⓐ.
2. Tighten the star head screw Ⓔ (hand-tight). (Fig. 3)
3. Swivel armrests Ⓑ on both sides upwards until the spring pin Ⓛ latches into the hole of the lock Ⓜ on the seat frame. (Fig 3)



CAUTION!
Risk of Falling
– Make sure that the spring pin latches on both sides with an audible click.

4. Place the footrests Ⓓ on both sides through the lateral holes Ⓚ into the attachment pins Ⓛ. (Fig 4)
5. Swivel both footrests to the front.

Adjust the height of the footrests (Fig. 5)

1. Pull up the lever Ⓞ and release the footrest by lifting it upward.
2. Loosen screw with nut Ⓜ with an Allen key and move the lower part of the footrests Ⓨ up or down. Tighten the nut again.
3. Place the footrest back in by proceeding in reverse order.

The device is dismantled by following the assembly procedure in reverse order.

11 Usage

Releasing the Armrests

1. Pull the spring pin knob Ⓛ. The armrest is released from its fixation Ⓛ and swivels downward. (Fig. 3)

Transfer to and from the Chair



CAUTION!
Risk of Trapping/Squeezing
All castor locks are foot-operated.
– Do not operate the castor locks by hand.

1. Lock the castor lock by stepping on the rear end of the pedal until it engages.
2. Flip up the footrests.
3. Alternative to 2.: Press the black lever to swivel the footrests to the side. (Fig. 5)



WARNING!
Risk of Slipping and Rolling
– Lock all castors with levers using the foot levers before sitting down on the toilet chair or standing up from it, as well as in the parking position.



WARNING!
Risk of Tipping!
– Swivel the footrests to the side or fold up the foot plates before sitting down or standing up.

Inserting/Removing the Toilet Pan



The toilet pan can be inserted/removed with or without cover.

1. Insert the upper rim of the toilet pan from the rear side between the seat and the brackets under the seat.



To remove the toilet pan, repeat step 1 in reverse order.



The toilet pan can be lifted and carried by its handle.

12 Maintenance

12.1 General Maintenance Information

This product is maintenance-free, provided that the cleaning and disinfection instructions are adhered to.

12.2 Cleaning and Disinfection

General Safety Information



CAUTION!
Risk of Contamination
– Take precautions for yourself and use appropriate protective equipment.

! IMPORTANT!

- Wrong fluids or methods can harm or damage the product.
- All cleaning agents and disinfectants used must be effective, compatible with one another and must protect the materials they are used to clean.
 - Never use corrosive fluids (alkalines, acid etc.) or abrasive cleaning agents. We recommend an ordinary household cleaning agent such as dishwashing liquid, if not specified otherwise in the cleaning instructions.
 - Never use a solvent (cellulose thinner, acetone etc.) that changes the structure of the plastic or dissolves the attached labels.
 - Always make sure that the product is completely dried before taking it into use again.

Cleaning Intervals**! IMPORTANT!**

- Regular cleaning and disinfection enhances smooth operation, increases the service life and prevents contamination.
Clean and disinfect the product
- regularly while it is in use,
 - before and after any service procedure,
 - when it has been in contact with any body fluids,
 - before using it for a new user.

Cleaning Instructions**! IMPORTANT!**

- Clean by hand
- Maximum cleaning temperature 60 °C

1. Clean the product by wiping down all generally accessible surfaces.
2. Dry the parts with a cloth.

Disinfection Instructions

Method: Follow the application notes for the used disinfectant and wipe-disinfect all accessible surfaces.

Disinfectant: Ordinary household disinfectant.

Drying: Allow the product to air-dry.

13 Reconditioning

This product is suitable for reuse. To recondition the product for a new user, carry out the following actions:

- Inspection
- Cleaning and disinfection

For detailed information, see *12 Maintenance, page 4*.

Make sure that the user manual is handed over with the product.

If any damage or malfunction is detected, do not reuse the product.

14 Disposal

Be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

Disassemble the product and its components, so the different materials can be separated and recycled individually.

The disposal and recycling of used products and packaging must comply with the laws and regulations for waste handling in each country. Contact your local waste management company for information.

15 Technical Data (Fig. 7)

Dimensions			
Ⓐ	445 mm	Ⓛ	750 mm
Ⓑ	455 mm	Ⓜ	400 – 510 mm
Ⓒ	490 mm	Ⓝ	425 mm
Ⓓ	580 mm	Ⓟ	510 mm
Ⓔ	930 mm	Ⓡ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Width, cut out in seat plate	205 mm
Ⓖ	620 mm	Depth, cut out in seat plate	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ Castors	127 mm (5")

Weights

Toilet Chair Cascata H720T4C	15.2 kg
Maximum user weight	130 kg

Materials

Ⓛ	Steel, powder coated	ⓂⓃⓅ	PVC
Ⓡ	PP		

All product components are corrosion resistant and do not contain natural rubber latex.

16 Environmental Parameters**Operating Conditions**

Ambient temperature	10 - 40 °C
Relative humidity	15% - 93%, non-condensing

Storage and Shipping Conditions

Ambient temperature	0 - 40 °C
Relative humidity	30% - 75%, non-condensing

de**1 Einleitung**

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Handhabung des Produkts. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, damit eine sichere Verwendung des Produkts gewährleistet ist.

Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Vergewissern Sie sich vor dem Lesen dieses Dokuments, dass Sie die aktuelle Fassung haben. Die jeweils aktuelle Fassung können Sie als PDF-Datei von der Invacare-Website herunterladen.

Wenn die gedruckte Ausführung des Dokuments für Sie aufgrund der Schriftgröße schwer zu lesen ist, können Sie die entsprechende PDF-Version von der Invacare-Website herunterladen. Sie können das PDF-Dokument dann auf dem Bildschirm so anzeigen, dass die Schriftgröße für Sie angenehmer ist.

Bei einem ernsthaften Vorfall mit dem Produkt informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

2 Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

3 Konformität

Qualität ist für das Unternehmen entscheidend. Alle Abläufe sind an den Anforderungen von ISO 13485 ausgerichtet.

Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und erfüllt die europäische Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte der Klasse I. Das Markteinführungsdatum des Produkts ist in der CE-Konformitätserklärung aufgeführt.

Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, die Umwelt durch unsere Unternehmenstätigkeit sowohl direkt vor Ort als auch weltweit möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Wir verwenden ausschließlich REACH-konforme Materialien und Bauteile.

3.1 Produktspezifische Normen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der Norm DIN EN 12182 (Technische Hilfen für behinderte Menschen) sowie den einschlägigen Normen. Weitere Informationen zu lokalen Normen und Vorschriften erhalten Sie bei Ihrem Invacare-Vertreter vor Ort. Die entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

4 Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt drei Jahre, vorausgesetzt, es wird täglich und in Übereinstimmung mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und korrekten Verfahrensweisen verwendet. Die tatsächliche Haltbarkeitsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren.

5 Beschränkung der Haftung

Invacare übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- falscher Verwendung
- normalem Verschleiß
- falscher Montage oder Einrichtung durch den Käufer oder einen Dritten
- technischen Änderungen
- unbefugten Änderungen bzw. Einsatz nicht geeigneter Ersatzteile

6 Sicherheit

6.1 Sicherheitsinformationen



WARNUNG!
Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden

Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Falls Ihnen die Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen unverständlich sind, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Anbieter, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt oder optionales Zubehör erst, nachdem Sie diese Anweisungen und mögliches zusätzliches Anweisungsmaterial

– wie die oder das zum Produkt oder optionalen Zubehör gehörende Gebrauchsanweisung, Servicehandbuch oder Merkblatt – vollständig gelesen und verstanden haben.



WARNUNG!
Sturzgefahr!

- Defekte Produkte nicht verwenden.
- Keine unbefugten Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nicht in der Dusche verwenden.
- Produkt von offenem Feuer fernhalten.
- Keine glimmenden Zigaretten auf dem Produkt ablegen.
- Nicht auf dieses Produkt stellen.
- Nicht als Steighilfe verwenden.
- Das Produkt unter Belastung nicht anheben.
- Toilettenstuhl nur auf ebenem Untergrund und im Innenbereich verwenden.



WARNUNG!
Kippgefahr!

- Stellen Sie sich niemals auf die Fußauflagen.
- Lehnen Sie sich niemals übermäßig nach vorn.



VORSICHT!
Gefahr von Hautverbrennungen!

Die Komponenten des Produkts können sich aufheizen, wenn sie externen Wärmequellen ausgesetzt werden.

- Setzen Sie das Produkt vor Gebrauch keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.



WARNUNG!

- Das Produkt vor der ersten Verwendung gründlich reinigen.
- Das Produkt vor jeder Verwendung auf Schäden überprüfen und sicherstellen, dass es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.




VORSICHT!
Verletzungsgefahr

Teile, die nicht in Original-Qualität vorliegen, oder falsche Teile können die Funktion und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.

- Für das verwendete Produkt ausschließlich Originalteile verwenden.
- Aufgrund regionaler Unterschiede ziehen Sie den Invacare-Katalog oder die Invacare-Website für Ihr Land zurate, um sich über verfügbare Optionen zu informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Invacare-Anbieter. Die entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

6.2 Etiketten und Symbole auf dem Produkt (Abb. 6)

(A)	Hersteller	(F)	Produktionsdatum
(B)	CE-Kennzeichnung	(G)	Medizinprodukt
(C)	Das Produkt nur auf ebenem Untergrund verwenden.	(H)	Chargennummer
(D)	Gebrauchsanweisung lesen	(I)	Referenznummer
(E)	Maximales Benutzergewicht	(J)	Produktbezeichnung

 Das Typenschild ist am linken hinteren Rohr angebracht.

7 Produktbeschreibung

Invacare Cascata H720T4C ist ein mobiler Toilettenstuhl, der aus herunterklappbaren, gepolsterten Armlehnen aus Kunststoff, einer gepolsterten Rückenlehne, wegschwenkbaren Fußauflagen, einer gepolsterten Sitzplatte mit Toilettenausschnitt und vier Schwenkrollen mit Bremse besteht. Ein Toilettentopf mit Deckel kann unter dem Sitz eingesetzt werden.

8 Lieferumfang (Abb. 1)

- **A** Rückenlehne
- **B** Armlehne (2 x) (vormontiert)
- **C** Sitzrahmen mit drehbaren Schwenkrollen und Toilettentopfhalterung mit Toilettentopf
- **D** Fußauflage (2 x)
- **E** Sternschraube (2 x)
- **F** Gebrauchsanweisung

9 Anwendungszweck

Dieses Produkt ist als Toilettenhilfsmittel für eine stabile Sitzposition beim Toilettengang vorgesehen.

Zum vorgesehenen Benutzerkreis zählen Erwachsene und Jugendliche mit Mobilitätseinschränkungen (z. B.: Beine und/oder Hüften). Bei Verwendung ohne Begleitperson müssen Benutzer in der Lage sein, das Gleichgewicht zu halten.

Indikation

Mobilitätseinschränkungen (z. B.: Beine und/oder Hüften) oder Gleichgewichtsprobleme beim Aufstehen oder Gehen aufgrund vorübergehender oder dauerhafter Behinderungen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produkts sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Maximales Benutzergewicht: 130 kg

10 Das Produkt zusammensetzen (Abb. 2 – 5)



VORSICHT!
Klemmgefahr

– Vorsicht bei der Montage.

1. Führen Sie das Rückenlehnenrohr **C** auf beiden Seiten von oben auf den Sitzrahmen. (Abb. 2) **A**.
2. Ziehen Sie die Sternschraube **F** (handfest) an. (Abb. 3)
3. Schwenken Sie die Armlehnen **B** auf beiden Seiten nach oben, bis der Federstift **1** in der Öffnung der Verriegelung **1** am Sitzrahmen einrastet. (Abb. 3)



VORSICHT!
Sturzgefahr

– Stellen Sie sicher, dass der Federstift auf beiden Seiten mit einem hörbaren Klicken einrastet.

4. Setzen die Fußauflagen **D** auf beiden Seiten durch die seitlichen Öffnungen **K** in die Befestigungsstifte **L** ein. (Abb. 4)
5. Schwenken Sie beide Fußauflagen nach vorne.

Stellen Sie die Höhe der Fußauflagen ein (Abb. 5)

1. Ziehen Sie den Hebel **©** nach oben und lösen Sie die Fußauflage, indem Sie sie anheben.
2. Lösen Sie Schraube und Mutter **Ⓜ** mithilfe eines Inbusschlüssels und bewegen Sie den unteren Teil der Fußauflagen **Ⓝ** nach oben oder unten. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
3. Bringen Sie die Fußauflage zurück an ihren Platz, indem Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Das Produkt wird demontiert, indem der Montagevorgang in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird.

11 Verwendung

Lösen der Armlehnen

1. Ziehen Sie am Federstiftzapfen **1**. Die Armlehne ist aus ihrer Fixierung gelöst **1** und schwenkt nach unten. (Abb. 3)

Transfer in den und aus dem Stuhl



VORSICHT!

Einklemmungs- und Quetschungsgefahr

Alle Schwenkrollenverriegelungen werden per Fuß bedient.

– Die Schwenkrollenverriegelungen nicht per Hand bedienen.

1. Verriegeln Sie die Schwenkrollenverriegelung, indem Sie auf das hintere Ende des Pedals treten, bis es einrastet.
2. Klappen Sie die Fußauflagen nach oben.
3. Alternative zu Punkt 2: Drücken Sie den schwarzen Hebel, um die Fußauflagen zur Seite zu schwenken. (Abb. 5)



WARNUNG!

Rutsch- und Rollgefahr

– Verriegeln Sie vor dem Hinsetzen oder Aufstehen aus dem Toilettenstuhl sowie in der Parkposition alle Schwenkrollen durch Hebel mithilfe der Fußhebel.



WARNUNG!

Kippgefahr!

– Drehen Sie vor dem Hinsetzen oder Aufstehen die Fußauflagen zur Seite oder klappen Sie die Fußplatten nach oben.

Einführen/Entfernen des Toilettentopfs



Der Toilettentopf kann mit oder ohne Abdeckung eingeführt/entfernt werden.

1. Führen Sie den oberen Rand des Toilettentopfs von der Rückseite her zwischen dem Toilettensitz und den Führungen unter dem Sitz ein.



Zum Entfernen des Toilettentopfs führen Sie Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge aus.



Der Toilettentopf kann an seinem Griff angehoben und getragen werden.

12 Instandhaltung

12.1 Allgemeine Hinweise zur Instandhaltung

Für dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die unten aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen beachtet werden.

12.2 Reinigung und Desinfektion

Allgemeine Sicherheitsinformationen



VORSICHT!

Kontaminationsgefahr

- Vorkehrungen für sich selbst treffen und geeignete Schutzausrüstung verwenden.



WICHTIG!

- Falsche Reinigungsmethoden oder -flüssigkeiten können zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen wirksam und miteinander verträglich sein und das Material schützen, das mit ihnen gereinigt wird.
 - Keinesfalls korrodierende Flüssigkeiten (Laugen, Säuren usw.) oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Wenn in der Reinigungsanleitung nichts anderes angegeben ist, empfehlen wir ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
 - Niemals Lösungsmittel (Nitroverdünnung, Aceton usw.) verwenden, die die Struktur des Kunststoffes verändern oder die angebrachten Etiketten angreifen.
 - Immer sicherstellen, dass das Produkt absolut trocken ist, bevor es wieder in Gebrauch genommen wird.

Reinigungsintervalle



WICHTIG!

- Regelmäßige Reinigung und Desinfektion sorgen für einen reibungslosen Betrieb, verlängern die Nutzungsdauer und verhindern Verunreinigungen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt
- regelmäßig, sofern es verwendet wird
 - vor und nach jeder Wartung
 - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
 - vor Benutzung durch einen neuen Patienten

Reinigungsanweisungen



WICHTIG!

- Von Hand reinigen
- Maximale Reinigungstemperatur 60 °C.

1. Reinigen Sie das Produkt, indem Sie alle direkt zugänglichen Oberflächen abwischen.
2. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.

Desinfektionsanweisungen

Methode: Befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen.

Desinfektionsmittel: Haushaltsübliches Desinfektionsmittel

Trocknen: Das Produkt an der Luft trocknen lassen.

13 Wiederaufbereitung

Dieses Produkt ist für die wiederholte Verwendung geeignet. Um das Produkt für einen neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Prüfung
- Reinigung und Desinfektion

Detaillierte Informationen siehe *12 Instandhaltung, Seite 7*.

Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

Das Produkt darf nicht wiederholt verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen vorliegen.

14 Entsorgung

Handeln Sie umweltbewusst, und lassen Sie dieses Produkt nach dem Ende seiner Lebensdauer über eine lokale Müllverwertungsanlage recyceln.

Demontieren Sie das Produkt und seine Bauteile, damit die verschiedenen Materialien einzeln getrennt und recycelt werden können.

Die Entsorgung und das Recycling von gebrauchten Produkten und Verpackungen müssen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes zur Abfallentsorgung erfolgen. Wenden Sie sich an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

15 Technische Daten (Abb. 7)

Abmessungen			
Ⓐ	445 mm	Ⓚ	750 mm
Ⓑ	455 mm	Ⓛ	400–510 mm
Ⓒ	490 mm	Ⓜ	425 mm
Ⓓ	580 mm	Ⓝ	510 mm
Ⓔ	930 mm	Ⓞ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Breite, Ausschnitt in der Sitzplatte	205 mm
Ⓖ	620 mm	Tiefe, Ausschnitt in der Sitzplatte	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ Schwenkrollen	127 mm (5 Zoll)

Gewichtsangaben	
Toilettenstuhl Cascata H720T4C	15,2 kg
Maximales Benutzergewicht	130 kg

Materialien			
Ⓛ	Pulverbeschichteter Stahl	ⓂⓃⓄ	PVC
Ⓟ	PP		

Alle Komponenten des Produkts sind korrosionsbeständig und enthalten kein Naturkautschuklatex.

16 Umweltparameter

Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % – 93 %, nicht kondensierend
Transport- und Lagerbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 %, nicht kondensierend

1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Si la taille des caractères de la version imprimée du document vous semble trop difficile à lire, vous pouvez télécharger la version PDF sur le site Internet. Vous pourrez alors ajuster la taille des caractères à l'écran pour améliorer votre confort visuel.

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

2 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

3 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la norme ISO 13485.

Ce produit porte le label CE et est conforme à la Réglementation sur les dispositifs médicaux de classe I 2017/745. La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration de conformité CE.

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

3.1 Normes spécifiques au produit

Ce produit a été testé et reconnu conforme à la norme EN 12182 (Produits d'assistance pour personnes handicapées) et à toutes les normes associées. Pour des informations complémentaires sur les normes et réglementations locales, contactez un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

4 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de trois ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

5 Limitation de responsabilité

Invacare décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

- un non respect du manuel d'utilisation,

- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

6 Sécurité

6.1 Informations de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de dommage matériel ou de blessure grave

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé ou un fournisseur avant d'essayer d'utiliser cet équipement.
- N'utilisez pas ce produit ni tout autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris entièrement les présentes instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle qu'un manuel d'utilisation, un manuel de maintenance ou une fiche d'instructions fournis avec ce produit ou l'équipement en option.



AVERTISSEMENT !

Risque de chute !

- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux.
- N'effectuez aucune modification ou transformation non autorisées du produit.
- Ne pas l'utiliser dans une douche.
- Éloignez le produit des flammes nues.
- Ne placez pas de cigarette mal éteinte sur le produit.
- Ne vous mettez pas debout sur le produit.
- Ne l'utilisez pas comme escabeau.
- Ne soulevez pas le produit lorsqu'il est sous charge.
- Utilisez uniquement la chaise toilette mobile sur un sol plat et à l'intérieur.



AVERTISSEMENT !

Risque de basculement !

- Ne vous tenez jamais debout sur les repose-pieds.
- Ne vous penchez pas excessivement à l'avant.



ATTENTION !

Risque de brûlure de la peau !

Les composants du produit peuvent s'échauffer en cas d'exposition à des sources de chaleur externes.

- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil avant de l'utiliser.



AVERTISSEMENT !

- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le produit.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il est correctement monté.

**ATTENTION !****Risque de blessure**

Des pièces non adaptées ou qui ne sont pas d'origine peuvent affecter le fonctionnement et la sécurité du produit.

- Utilisez uniquement les pièces d'origine du produit utilisé.
- En raison de différences régionales, vous devez vous reporter au site Internet ou au catalogue Invacare de votre pays pour connaître les options disponibles ; vous pouvez également contacter votre distributeur Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

6.2 Étiquettes et symboles figurant sur le produit (Fig. 6)

Ⓐ	Fabricant	Ⓕ	Date de production
Ⓑ	Conformité européenne	Ⓖ	Dispositif médical
Ⓒ	À utiliser uniquement sur un sol uniforme	Ⓗ	Numéro de lot
Ⓓ	Consultez le manuel d'utilisation	Ⓛ	Numéro de référence
Ⓔ	Poids maximal de l'utilisateur	Ⓜ	Désignation du produit



L'autocollant d'identification est fixé sur le tube arrière gauche du produit.

7 Description du produit

Invacare Cascata H720T4C est une chaise toilette mobile composée d'accoudoirs rabattables et rembourrés en plastique, d'un dossier rembourré, avec repose-pieds escamotable, d'une plaque d'assise rembourrée avec découpe pour toilettes et quatre roulettes freinées. Un seau avec couvercle peut être placée sous le siège.

8 Contenu (Fig. 1)

- Ⓐ Dossier
- Ⓑ Accoudoir (2x) (prémonté)
- Ⓒ Armature du siège avec roulettes pivotantes et support de seau avec seau
- Ⓓ Repose-pieds (2x)
- Ⓔ Vis à tête étoilée (2x)
- Ⓕ Manuel d'utilisation

9 Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme une aide pour aller aux toilettes, en assurant une position assise stable.

Les utilisateurs sont des adultes et des adolescents dont les mouvements sont restreints ou limités (par ex. : jambes et/ou hanches). Sans l'aide d'une tierce-personne, les utilisateurs doivent être en mesure de garder leur équilibre.

Indication

Mouvements restreints ou limités (par ex. : jambes et/ou hanches) ou problèmes d'équilibre pour se lever ou marcher en raison d'un handicap transitoire ou permanent.

Il n'existe aucune contre-indication connue, lorsque le produit est utilisé comme prévu.

Poids maximal de l'utilisateur : 130 kg

10 Montage du produit (Fig. 2 à 5)

**ATTENTION !****Risque de coincement**

– Procédez avec précaution lors du montage.

1. Guidez le tube de dossier Ⓒ des deux côtés, du haut vers l'armature du siège. (Fig. 2) Ⓐ.
2. Serrez la vis à tête étoilée Ⓕ (à la main). (Fig. 3)
3. Relevez les accoudoirs Ⓑ des deux côtés jusqu'à ce que la goupille à ressort Ⓛ s'enclenche dans le trou du verrouillage Ⓛ situé sur l'armature du siège. (Fig. 3)

**ATTENTION !****Risque de chute**

– Veillez à ce que la goupille à ressort s'enclenche des deux côtés en produisant un déclic.

4. Insérez les repose-pieds Ⓓ des deux côtés, par les orifices latéraux Ⓚ des broches de fixation Ⓛ. (Fig. 4)
5. Rabattez les deux repose-pieds vers l'avant.

Réglez la hauteur des repose-pieds (fig. 5).

1. Ouvrez le levier Ⓞ et relâchez le repose-pied en le levant vers le haut.
2. Desserrez la vis avec l'écrou Ⓜ à l'aide d'une clé Allen et déplacez la partie inférieure des repose-pieds Ⓨ vers le haut ou vers le bas. Resserrez l'écrou.
3. Remettez le repose-pieds en place en procédant en sens inverse.

Pour démonter le dispositif, effectuez les étapes de montage dans l'ordre inverse.

11 Utilisation

Déverrouillage des accoudoirs

1. Tirez sur la molette de la goupille à ressort Ⓛ. L'accoudoir est déverrouillé de sa fixation Ⓛ et pivote vers le bas. (Fig. 3)

Transfert vers et depuis la chaise toilette mobile

**ATTENTION !****Risque de coincement/pincement**

Tous les dispositifs de verrouillage des roulettes sont actionnés au pied.
– N'actionnez pas les dispositifs de verrouillage des roulettes avec la main.

1. Verrouiller le dispositif de verrouillage des roulettes en appuyant avec le pied sur l'extrémité arrière de la pédale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Relevez les repose-pieds.
3. Deuxième solution : appuyez sur le levier noir pour faire pivoter les repose-pieds sur le côté. (Fig. 5)


**AVERTISSEMENT !****Risque de roulement ou de glissement**

– Verrouillez toutes les roulettes freinées à l'aide des pédales avant de vous asseoir sur la chaise toilette mobile ou de vous relever, ainsi qu'en position d'arrêt.


**AVERTISSEMENT !****Risque de basculement !**


– Faites pivoter les repose-pieds sur le côté ou repliez les palettes repose-pieds avant de vous asseoir ou de vous mettre debout.

Insertion/démontage du seau

 Le seau peut être inséré/retiré avec ou sans couvercle.

1. Insérez le bord supérieur du seau par l'arrière entre le siège et les supports placés sous le siège.

 Pour retirer le seau, reprenez l'étape 1 dans l'ordre inverse.

 Le seau peut être soulevé et transporté par sa poignée.

12 Maintenance

12.1 Informations de maintenance générales

Aucune maintenance de ce produit n'est nécessaire si les instructions de nettoyage et de désinfection sont respectées.

12.2 Nettoyage et désinfection

Informations de sécurité générales



ATTENTION ! **Risque de contamination**

- Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et portez un équipement de protection adéquat.



IMPORTANT !

- Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.
- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.
 - N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
 - N'utilisez jamais de solvant (diluants cellulose, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.
 - Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.

Fréquence de nettoyage



IMPORTANT !

- Une désinfection et un nettoyage régulier garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination.
- Nettoyez et désinfectez le produit
- régulièrement lors de son utilisation,
 - avant et après toute procédure d'entretien,
 - lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient,
 - avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

Instructions de nettoyage



IMPORTANT !

- Nettoyez le produit à la main
- Température maximale de nettoyage : 60 °C.

1. Nettoyez le produit, essuyez toutes les surfaces généralement accessibles.
2. Essuyez les pièces avec un chiffon sec.

Instructions de désinfection

Méthode : suivez les consignes d'application du désinfectant utilisé et essuyez toutes les surfaces accessibles pour les désinfecter.

Désinfectant : désinfectant ordinaire à usage domestique.

Séchage : Laissez sécher le produit à l'air.

13 Reconditionnement

Ce produit peut être réutilisé. Pour reconditionner le produit en vue de son utilisation par un nouvel utilisateur, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- Inspection
- Nettoyage et désinfection

Reportez-vous à la section *12 Maintenance, page 11* pour plus d'informations.

Assurez-vous de remettre le manuel d'utilisation avec le produit.

Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, le produit ne doit pas être réutilisé.

14 Mise au rebut

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays. Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

15 Caractéristiques techniques (Fig. 7)

Dimensions			
Ⓐ	445 mm	Ⓚ	750 mm
Ⓑ	455 mm	Ⓛ	400 — 510 mm
Ⓒ	490 mm	Ⓜ	425 mm
Ⓓ	580 mm	Ⓝ	510 mm
Ⓔ	930 mm	Ⓞ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Largeur, découpe de la plaque d'assise	205 mm
Ⓖ	620 mm	Profondeur, découpe de la plaque d'assise	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ roulettes	127 mm (5")

Poids	
Chaise toilette mobile Cascata H720T4C	15,2 kg
Poids maximal de l'utilisateur	130 kg

Matériaux			
①	Acier, revêtement poudre	②③④	PVC
⑤	PP		

Tous les composants du produit sont résistants à la corrosion et exempts de latex de caoutchouc naturel.

16 Paramètres environnementaux

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante	10 °C - 40 °C
Humidité relative	15 % - 93 %, sans condensation
Conditions de stockage et de transport	
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Humidité relative	30 % - 75 %, sans condensation

it

1 Introduzione

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti sul trattamento del prodotto. Per garantire la sicurezza di utilizzo del prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni di sicurezza.

Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza ulteriore preavviso.

Prima di leggere il presente documento, verificare di essere in possesso dell'ultima versione, disponibile in formato PDF sul sito web Invacare.

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella versione cartacea del documento sia di difficile lettura, è possibile scaricare dal sito web la versione in formato PDF. Il PDF può essere ingrandito sullo schermo in modo da ottenere una dimensione dei caratteri più facile da leggere.

In caso di incidente grave relativo al prodotto, è necessario informare il produttore e l'autorità competente nel proprio paese.

2 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in conformità di quanto indicato sui Termini e le condizioni generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia può essere fatta valere solo attraverso il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

3 Conformità

La qualità è fondamentale per l'azienda, che opera nel rispetto e nell'ambito della norma ISO 13485.

Il prodotto è dotato di marchio CE, in conformità al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 Classe I. La data di lancio di questo prodotto è indicata nella dichiarazione di conformità CE.

Lavoriamo costantemente per garantire che l'impatto ambientale dell'azienda a livello locale e globale sia ridotto al minimo.

Garantiamo di utilizzare esclusivamente materiali e componenti conformi alla direttiva REACH.

3.1 Standard specifici per il prodotto

Il prodotto è stato testato ed è conforme a EN 12182 (Prodotti di assistenza per disabili) e agli standard correlati. Per ulteriori informazioni sulle norme e sulle disposizioni locali, contattare il rappresentante locale Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del presente documento.

4 Durata

La durata prevista per questo prodotto è di tre anni, a condizione che sia utilizzato quotidianamente e in conformità alle istruzioni per la sicurezza, seguendo gli intervalli di manutenzione e le indicazioni per un uso corretto come indicato nel presente manuale. La durata effettiva può variare a seconda della frequenza e dell'intensità d'uso.

5 Limiti di responsabilità

Invacare non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- Non conformità con il manuale d'uso
- Utilizzo non corretto
- Consumo e usura naturali
- Montaggio o preparazione non corretti da parte dell'acquirente o di terzi
- Modifiche tecniche
- Modifiche non autorizzate e/o utilizzo di pezzi di ricambio non adatti

6 Sicurezza

6.1 Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni gravi o danni

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni o danni.

- In presenza di messaggi di attenzione, precauzioni o istruzioni di difficile comprensione, contattare il personale medico professionale o il fornitore prima di iniziare a utilizzare questo prodotto.
- Non usare questo prodotto o nessun altro dispositivo opzionale disponibile senza prima aver letto attentamente e compreso fino in fondo le presenti istruzioni e ogni altro materiale informativo come il manuale d'uso, il manuale per la manutenzione o i fogli di istruzione forniti con questo prodotto o con i dispositivi opzionali.



ATTENZIONE!

Pericolo di caduta!

- Non utilizzare se difettoso.
- Non apportare alterazioni o modifiche non autorizzate al prodotto.
- Non utilizzare nella doccia.
- Tenere il prodotto al riparo da fiamme libere.
- Non appoggiare sigarette accese sul prodotto.
- Non salire in piedi sul prodotto.
- Non utilizzare come ausilio per arrampicarsi.
- Non sollevare il prodotto quando è sotto carico.
- Utilizzare la sedia da toilette solo su un terreno piano e all'interno.



ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento!

- Non salire sui poggiatesta.
- Non sporgersi eccessivamente in avanti.

**AVVERTENZA!****Rischio di ustioni della pelle!**

I componenti del prodotto possono riscaldarsi se esposti a fonti di calore esterne.

- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole prima dell'uso.

**ATTENZIONE!**

- Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente il prodotto.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non abbia subito danni e assicurarsi che sia ben assemblato.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni**

Componenti non originali o non corretti possono alterare il funzionamento e la sicurezza del prodotto.

- Utilizzare esclusivamente componenti originali per il prodotto in uso.
- In considerazione delle differenze regionali, fare riferimento al sito web o al catalogo locale di Invacare per le opzioni disponibili oppure contattare il proprio distributore Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del presente documento.

6.2 Etichette e simboli sul prodotto (Fig. 6)

Ⓐ	Produttore	Ⓕ	Data di produzione
Ⓑ	Conformità europea	Ⓖ	Dispositivo medico
Ⓒ	Per l'uso solo su terreni privi di dislivelli	Ⓗ	Numero di lotto
Ⓓ	Leggere il manuale d'uso	Ⓘ	Codice di riferimento
Ⓔ	Peso utilizzatore massimo	⓫	Denominazione del prodotto



L'etichetta modello è attaccata sul tubo sinistro posteriore del prodotto.

7 Descrizione del prodotto

Invacare Cascata H720T4C è una carrozzina da toilette mobile composta da braccioli ribaltabili imbottiti in plastica, schienale imbottito, poggiatesta basculante, piastra del sedile imbottita con apertura per toilette e quattro ruote orientabili frenate. Una padella con coperchio può essere posizionata sotto il sedile.

8 Contenuto della fornitura (Fig. 1)

- Ⓐ Schienale
- Ⓑ Bracciolo (2x) (preassemblato)
- Ⓒ Telaio del sedile con ruote orientabili girevoli e supporto per padella con padella
- Ⓓ Poggiatesta (2x)
- Ⓔ Manopola a stella (2x)
- Ⓕ Manuale d'uso

9 Uso previsto

Questo prodotto è concepito per essere utilizzato come ausilio per la toilette e fornisce una posizione di seduta stabile mentre si va in bagno.

Gli utilizzatori sono adulti e adolescenti con mobilità ridotta o limitata (ad esempio, gambe e/o fianchi). Se utilizzato

senza assistente, gli utilizzatori devono essere in grado di mantenere l'equilibrio.

Indicazione

Mobilità ridotta o limitata (ad esempio: gambe e/o fianchi) o problemi di equilibrio quando ci si alza o si cammina a causa di disabilità transitorie o permanenti.

Se si utilizza il prodotto come previsto, non sono note controindicazioni.

Peso utilizzatore massimo: 130 kg

10 Assemblaggio del prodotto (Fig. 2 - 5)**AVVERTENZA!****Pericolo di intrappolamento**

- Prestare attenzione durante il montaggio.

1. Guidare il tubo dello schienale Ⓒ su entrambi i lati, dalla parte superiore sul telaio del sedile. (Fig 2) Ⓐ.
2. Serrare la manopola a stella Ⓕ (a mano). (Fig. 3)
3. Ruotare i braccioli Ⓑ su entrambi i lati verso l'alto fino a quando il perno a molla Ⓘ non si aggancia nel foro del blocco ⓫ sul telaio del sedile. (Fig 3)

**AVVERTENZA!****Pericolo di caduta**

- Assicurarsi che il perno a molla si agganci su entrambi i lati con un clic udibile.

4. Posizionare i poggiatesta Ⓓ su entrambi i lati attraverso i fori laterali Ⓚ nei perni di fissaggio Ⓛ. (Fig 4)
5. Ruotare entrambi i poggiatesta verso la parte anteriore.

Regolare l'altezza dei poggiatesta (Fig. 5)

1. Tirare la leva Ⓒ verso l'alto e rilasciare il poggiatesta sollevandolo verso l'alto.
2. Allentare la vite con il dado Ⓜ con una chiave a brugola e spostare la parte inferiore dei poggiatesta Ⓝ verso l'alto o verso il basso. Serrare il dado di nuovo.
3. Riposizionare il poggiatesta procedendo in ordine inverso.

Il dispositivo viene smontato eseguendo la procedura di montaggio in ordine inverso.

11 Uso**Rilascio dei braccioli**

1. Tirare la manopola del perno a molla Ⓘ. Il bracciolo viene rilasciato dal relativo fissaggio Ⓘ e ruota verso il basso. (Fig. 3)

Trasferimento da e verso la sedia**AVVERTENZA!****Rischio di intrappolamento/schiacciamento**

- Tutti i dispositivi di bloccaggio delle ruote orientabili si azionano con i piedi.
- Non azionare i dispositivi di bloccaggio delle ruote orientabili con le mani.

1. Bloccare il dispositivo di bloccaggio delle ruote orientabili premendo la parte posteriore del pedale fino a quando non si innesta.
2. Sollevare i poggiatesta.
3. Alternativa a 2: Premere la leva nera per ruotare lateralmente i poggiatesta. (Fig. 5)

**ATTENZIONE!****Rischio di scivolamento e ribaltamento**

– Bloccare tutte le ruote orientabili con le levette a pedale prima di sedersi sulla sedia da toilette o alzarsi da essa, anche nella posizione di stazionamento.

**ATTENZIONE!****Rischio di ribaltamento!**

– Ruotare lateralmente i poggiapiedi o ripiegare le pedane verso l'alto prima di sedersi o di alzarsi in piedi.

Inserimento/Rimozione della padella

La padella può essere inserita/rimossa con o senza coperchio.

1. Inserire il cerchio superiore della padella dal lato posteriore tra il sedile e le staffe presenti sotto il sedile.



Per rimuovere la padella, ripetere il passaggio 1 nell'ordine inverso.



La padella può essere sollevata e trasportata mediante la sua impugnatura.

12 Manutenzione**12.1 Informazioni generali per la manutenzione**

Questo prodotto non richiede manutenzione, a condizione che siano rispettate le istruzioni di pulizia e di disinfezione descritte di seguito.

12.2 Pulizia e disinfezione**Informazioni generali sulla sicurezza****AVVERTENZA!****Rischio di contaminazione**

– Adottare opportune precauzioni per la propria protezione e utilizzare un'attrezzatura protettiva adeguata.

**IMPORTANTE!**

Liquidi inappropriati o metodi errati potrebbero danneggiare il prodotto.

- Tutti i prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati devono essere efficaci, compatibili tra loro e devono proteggere i materiali su cui vengono utilizzati durante la pulizia.
- Non utilizzare mai liquidi corrosivi (sostanze alcaline, acidi, ecc.) o detergenti abrasivi. Si consiglia di utilizzare un normale prodotto detergente per la casa, come un detersivo liquido per i piatti, a meno che non siano state fornite indicazioni diverse nelle istruzioni di pulizia.
- Non utilizzare mai solventi (diluente per cellulosa, acetone, ecc.) che modificano la struttura della plastica o che sciolgono le etichette applicate.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi sempre che sia completamente asciutto.

Intervalli di pulizia**IMPORTANTE!**

La pulizia e la disinfezione regolari consentono di assicurare il regolare e buon funzionamento, aumentare la durata e prevenire la contaminazione. Pulire e disinfettare regolarmente il prodotto.

- durante l'uso,
- prima e dopo qualsiasi procedura di manutenzione,
- in caso di contatto con liquidi biologici,
- prima dell'uso per un nuovo utilizzatore.

Istruzioni per la pulizia**IMPORTANTE!**

- Pulire a mano
- Temperatura massima di pulizia 60 °C

1. Pulire il prodotto strofinando tutte le superfici generalmente accessibili.
2. Asciugare le parti con un panno.

Istruzioni per la disinfezione

Metodo: Seguire le note applicative per il disinfettante utilizzato e disinfettare con una salvietta tutte le superfici accessibili.

Disinfettante: normale disinfettante per la casa.

Asciugatura: Lasciare asciugare il prodotto all'aria.

13 Ricondizionamento

Questo prodotto è adatto per il riutilizzo. Per il ricondizionamento del prodotto per un nuovo utilizzatore, intraprendere le azioni seguenti:

- Ispezione
- Pulizia e disinfezione

Per ulteriori informazioni, consultare *12 Manutenzione, pagina 14*.

Assicurarsi che il manuale d'uso venga sempre consegnato insieme al prodotto.

Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, non riutilizzare il prodotto.

14 Smaltimento

Rispettare l'ambiente e riciclare il prodotto attraverso un centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

Smontare il prodotto e i relativi componenti, in modo che i differenti materiali possano essere staccati e riciclati singolarmente.

Lo smaltimento e il riciclaggio dei prodotti usati e degli imballaggi devono essere eseguiti nel rispetto delle leggi e delle normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, contattare la propria azienda di raccolta rifiuti locale.

15 Dati tecnici (Fig. 7)

Dimensioni			
(A)	445 mm	(I)	750 mm
(B)	455 mm	(J)	400 - 510 mm
(C)	490 mm	(K)	425 mm
(D)	580 mm	(L)	510 mm
(E)	930 mm	(M)	460 mm

Dimensioni			
Ⓕ	975 mm	Larghezza, apertura nella piastra del sedile	205 mm
Ⓖ	620 mm	Profondità, apertura nella piastra del sedile	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ ruote orientabili	127 mm (5")

Pesi	
Sedia da toilette Cascata H720T4C	15,2 kg
Peso utilizzatore massimo	130 kg

Materiali			
①	Acciaio verniciato a polvere	②③④	PVC
⑤	PP		

Tutti i componenti del prodotto sono resistenti alla corrosione e non contengono lattice di gomma naturale.

16 Parametri ambientali

Condizioni di funzionamento	
Temperatura ambiente	10 - 40 °C
Umidità relativa	15% - 93% non condensante
Condizioni di conservazione e di trasporto:	
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Umidità relativa	30% - 75% non condensante

1 Introduzione

Este manual del usuario contiene información importante sobre el manejo del producto. Para garantizar su seguridad al utilizar el producto, lea detenidamente el manual del usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Invacare se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Antes de leer este documento, asegúrese de contar con la versión más reciente. Podrá encontrarla en formato PDF en el sitio web de Invacare.

Si la versión impresa del documento tiene un tamaño de letra que le resulta difícil de leer, podrá descargarlo en formato PDF en el sitio web. Podrá ampliar el PDF en pantalla a un tamaño de letra que le resulte más cómodo.

En caso de un accidente grave con el producto, informe al fabricante y a las autoridades competentes de su país.

2 Información sobre la garantía

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales en los distintos países.

Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

3 Cumplimiento

La calidad es fundamental para el funcionamiento de nuestra empresa, que trabaja conforme a las normas ISO 13485.

Este producto lleva la marca CE, en cumplimiento con el Reglamento 2017/745 sobre productos sanitarios de clase 1. La fecha de lanzamiento de este producto figura en la declaración de conformidad de la CE.

Trabajamos continuamente para garantizar que se reduzca al mínimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto a nivel local como global.

Solo utilizamos materiales y componentes que cumplen con las directivas REACH.

3.1 Normas específicas del producto

El producto ha sido sometido a pruebas y cumple la norma EN 12182 (Ayudas técnicas para personas con discapacidad) y las normas relacionadas. Para obtener más información sobre las normativas locales, póngase en contacto con el representante local de Invacare. Consulte las direcciones al final de este documento.

4 Vida útil

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

5 Limitación de responsabilidad

Invacare no se hace responsable de los daños surgidos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros
- Modificaciones técnicas
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados

6 Seguridad

6.1 Información de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de daños o lesiones graves

Un uso incorrecto de este producto puede provocar lesiones o daños.

- Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario o con su proveedor antes de intentar utilizar este equipo.
- No utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como el manual del usuario, manual de servicio u hoja de instrucciones proporcionados con este producto o equipo opcional.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de caídas**

- No utilice el producto si está defectuoso.
- No realice modificaciones ni alteraciones no autorizadas en el producto.
- No lo use en la ducha.
- Mantenga el producto alejado del fuego.
- No deje cigarrillos encendidos sobre el producto
- No ponerse de pie sobre este producto.
- No lo utilice como ayuda para escalar.
- No levante el producto cuando soporte una carga.
- Utilice solamente la silla de inodoro en una superficie uniforme y en interiores.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de volcado**

- Nunca se ponga de pie sobre los reposapiés.
- No se incline demasiado hacia delante.

**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de quemaduras en la piel**

- Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a fuentes de calor externas.
- No exponga el producto a la luz solar directa antes de utilizarlo.

**¡ADVERTENCIA!**

- Antes de utilizarlo por primera vez, limpie a fondo el producto.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto no esté dañado y asegúrese de que esté montado de forma segura.

**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de lesiones**

- El uso de piezas incorrectas o que no sean originales puede afectar el funcionamiento y la seguridad del producto.
- Utilice solo piezas originales para usar el producto.
 - Dadas las diferencias regionales existentes, consulte en el catálogo o en el sitio web de Invacare las opciones disponibles o póngase en contacto con su distribuidor de Invacare. Consulte las direcciones que figuran al final de este documento.

6.2 Etiquetas y símbolos del producto (Fig. 6)

(A)	Fabricante	(F)	Fecha de fabricación
(B)	Conformidad europea	(G)	Producto sanitario
(C)	Solo para uso en suelo uniforme	(H)	Número de lote
(D)	Lea el manual del usuario	(I)	Referencia de producto
(E)	Peso del usuario máximo	(J)	Nombre del producto



La etiqueta de identificación está fijada en el tubo posterior izquierdo del producto.

7 Descripción del producto

Invacare Cascata H720T4C es una silla de inodoro móvil que consta de reposabrazos acolchados de plástico que se pueden bajar, un respaldo acolchado, reposapiés abatible,

una placa de asiento acolchada con asiento de inodoro y cuatro ruedas con freno. Se puede colocar bajo el asiento una cubeta de inodoro con tapa.

8 Contenido de la entrega (Fig. 1)

- (A) Respaldo
- (B) Reposabrazos (2x) (premontados)
- (C) Chasis del asiento con ruedas giratorias y soporte para cubeta de inodoro con cubeta de inodoro
- (D) Reposapiés (2x)
- (E) Tornillo con cabeza de estrella (2x)
- (F) Manual del usuario

9 Uso previsto

Este producto está diseñado para utilizarse como ayuda para el inodoro, al proporcionar una posición sentada estable mientras se usa el inodoro.

Está destinado a usuarios adultos y adolescentes con movilidad reducida o limitada (por ejemplo: piernas y/o caderas). Si se utiliza sin un ayudante, los usuarios deben ser capaces de mantener el equilibrio.

Indicación

Movilidad restringida o limitada (p. ej.: piernas y/o caderas) o tener problemas de equilibrio para ponerse en pie o caminar debido a discapacidades transitorias o permanentes.

No existen contraindicaciones conocidas cuando el producto se utiliza del modo previsto.

Peso del usuario máximo: 130 kg

10 Montaje del producto (Fig. 2 – 5)**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de atrapamiento**

- Tenga cuidado durante el montaje.

1. Guíe el tubo del respaldo (C) de los dos lados, desde arriba, sobre el chasis del asiento. (Fig. 2) (A).
2. Apriete el tornillo con cabeza de estrella (F) (apretado a mano). (Fig. 3)
3. Gire los reposabrazos (B) de los dos lados hacia arriba hasta que el pasador con muelle (I) se enganche en el orificio del bloqueo (J) del chasis del asiento. (Fig. 3)

**¡PRECAUCIÓN!****Riesgo de caída**

- Asegúrese de que el pasador con muelle se engancha en ambos lados, para lo que tiene que oír un claro "clik".

4. Coloque los reposapiés (D) de los dos lados a través de los orificios laterales (K) en los pasadores de sujeción (L). (Fig. 4)
5. Gire los dos reposapiés hacia el frente.

Ajuste la altura de los reposapiés (Fig. 5)

1. Tire hacia arriba de la palanca (M) y suelte el reposapiés levantándolo hacia arriba.
2. Afloje el tornillo con tuerca (N) con una llave Allen y mueva la parte inferior de los reposapiés (N) hacia arriba o hacia abajo. Vuelva a apretar la tuerca.
3. Vuelva a colocar el reposapiés siguiendo los pasos en orden inverso.

El aparato se desmonta siguiendo el procedimiento de montaje en orden inverso.

11 Utilización

Liberación de los reposabrazos

1. Tire de la perilla del pasador con muelle ①. El reposabrazos se libera de su fijación ① y se mueve hacia abajo. (Fig. 3)

Traslado hacia y desde la silla



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de atrapamiento o aplastamiento de los dedos

Todos los bloqueos de las ruedas se accionan con los pies.
– No accione los bloqueos de las ruedas con las manos.

1. Bloquee el freno de las ruedas pisando el extremo trasero del pedal hasta que encaje.
2. Levante los reposapiés.
3. Alternativa a 2.: Pulse la palanca negra para girar los reposapiés hacia el lateral. (Fig. 5)



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de deslizamiento y volcado

– Bloquee todas las ruedas con las lengüetas de pie antes de sentarse en la silla de inodoro o de levantarse de ella, y también en la posición de estacionamiento.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de volcado

– Gire los reposapiés hacia el lateral o pliegue hacia arriba las paletas de los reposapiés antes de sentarse o de levantarse.

Inserción y extracción de la cubeta de inodoro



La cubeta de inodoro se puede insertar/extraer con o sin la tapa.

1. Inserte el borde superior de la cubeta de inodoro desde atrás entre el asiento y los soportes de debajo del asiento.



Para extraer la cubeta de inodoro, repita el paso 1 en orden inverso.



La cubeta de inodoro se puede levantar y trasladar por su asa.

12 Mantenimiento

12.1 Información sobre mantenimiento general

Este producto no precisa ningún mantenimiento, siempre que se sigan las instrucciones de limpieza y desinfección.

12.2 Limpieza y desinfección

Información general de seguridad



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de contaminación

– Adopte las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección adecuado.



¡IMPORTANTE

Seguir métodos erróneos o utilizar fluidos incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.
– Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben proteger los materiales que se van a limpiar.
– Nunca utilice fluidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos. Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas, si no especifica lo contrario en las instrucciones de limpieza.
– No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.
– Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

Intervalos de limpieza



¡IMPORTANTE

La limpieza y la desinfección habituales mejoran el correcto funcionamiento, aumentan la vida útil y evitan la contaminación.
Limpie y desinfecte el producto
– periódicamente mientras esté en uso,
– antes y después de cualquier procedimiento de mantenimiento,
– cuando haya estado en contacto con fluidos corporales,
– antes de usarlo con un nuevo usuario.

Instrucciones de limpieza



¡IMPORTANTE

– Limpie el producto a mano
– Temperatura de limpieza máxima 60 °C

1. Limpie el producto limpiando todas las superficies accesibles con desinfectante.
2. Seque las piezas con un paño.

Instrucciones de desinfección

Método: Siga las instrucciones de aplicación del desinfectante y limpie y desinfecte todas las superficies accesibles.

Desinfectante: Desinfectante doméstico habitual.

Secado: Deje que el producto se seque al aire.

13 Reacondicionamiento

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Para obtener información detallada, consulte 12 *Mantenimiento*, página 17.

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

14 Eliminación

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

15 Datos técnicos (Fig. 7)

Dimensiones			
Ⓐ	445 mm	Ⓚ	750 mm
Ⓑ	455 mm	Ⓛ	De 400 a 510 mm
Ⓒ	490 mm	Ⓚ	425 mm
Ⓓ	580 mm	Ⓛ	510 mm
Ⓔ	930 mm	Ⓜ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Anchura, hueco en la placa del asiento	205 mm
Ⓖ	620 mm	Profundidad, hueco en la placa del asiento	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ de ruedas giratorias	127 mm (5")

Pesos	
Silla de inodoro Cascata H720T4C	15,2 kg
Peso del usuario máximo	130 kg

Materiales			
Ⓛ	Acero, pintura electrostática	②③④	PVC
⑤	PP		

Todos los componentes del producto son resistentes a la corrosión y no contienen látex de caucho natural.

16 Parámetros medioambientales

Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	De 10 a 40 °C
Humedad relativa	Del 15 % al 93 % sin condensación
Condiciones de envío y almacenamiento	
Temperatura ambiente	De 0 a 40 °C
Humedad relativa	Del 30 % al 75 % sin condensación

pt

1 Introdução

Este manual de utilização contém informações importantes sobre o manuseamento do produto. Para garantir a segurança durante a utilização do produto, leia atentamente o manual de utilização e siga as instruções de segurança.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Antes de ler este documento, certifique-se de que tem a versão mais recente. A versão mais recente está disponível no site da Invacare, em formato PDF.

Se o tamanho do tipo de letra no documento impresso for difícil de ler, pode transferir uma versão em PDF do manual a partir do site. A imagem do PDF pode ser ajustada no ecrã para um tamanho de tipo de letra que lhe seja mais cómodo.

Em caso de incidente grave com o produto, deve informar o fabricante e as autoridades competentes do seu país.

2 Informações da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em conformidade com os nossos Termos e Condições Gerais de Compra nos respetivos países.

As reclamações de garantia só podem ser realizadas através do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

3 Conformidade

A qualidade é fundamental para o funcionamento da empresa, estando em conformidade com a norma ISO 13485.

Este produto apresenta a marca CE, em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos 2017/745, Classe I. A data de lançamento deste produto é indicada na declaração de conformidade da CE.

Temos empreendido um esforço contínuo para reduzir ao mínimo o impacto local e global da empresa no ambiente.

Apenas utilizamos materiais e componentes que cumprem a diretiva REACH.

3.1 Normas específicas do produto

O produto foi testado e está em conformidade com a norma EN 12182 (Produtos de assistência para pessoas com deficiências) e normas relacionadas. Para obter informações adicionais sobre as normas e os regulamentos locais, contacte o representante local da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

4 Vida útil

A vida útil prevista deste produto é de três anos, quando o mesmo é utilizado diariamente e em conformidade com as instruções de segurança, intervalos de manutenção e utilização correcta indicados neste manual. A vida útil efectiva pode variar de acordo com a frequência e intensidade de utilização.

5 Limitação de responsabilidade

A Invacare não aceita a responsabilidade por danos decorrentes de:

- Incumprimento das instruções presentes no manual de utilização
- Utilização incorreta
- Desgaste natural devido ao uso
- Montagem ou preparação incorreta pelo comprador ou por terceiros
- Modificações técnicas
- Modificações não autorizadas e/ou utilização de peças sobressalentes desadequadas

6 Segurança

6.1 Informações de segurança



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesão grave ou danos

A utilização incorreta deste produto pode causar lesões ou danos.

- Se não compreender as advertências, avisos ou instruções, contacte um profissional de cuidados de saúde ou o fornecedor antes de tentar utilizar este equipamento.
- Não utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem primeiro ler e compreender estas instruções e todo o material de instrução adicional, assim como o manual de utilização, o manual de assistência ou o folheto de instruções fornecidos com este produto ou com equipamento opcional.



ADVERTÊNCIA!

Risco de queda!

- Não utilizar se apresentar defeitos.
- Não fazer quaisquer modificações nem alterações não autorizadas ao produto.
- Não utilizar no chuveiro.
- Manter o produto longe de chamas abertas.
- Não colocar cigarros acesos sobre o produto.
- Não se coloque de pé em cima deste produto.
- Não utilizar como auxiliar de escalada.
- Não levantar o produto quando incluir carga.
- Utilizar apenas a cadeira sanitária em terreno plano e em interiores.



ADVERTÊNCIA!

Risco de basculação!

- Nunca se coloque de pé sobre os apoios de pés.
- Não se incline excessivamente para a frente.



ATENÇÃO!

Risco de queimaduras na pele!

Os componentes do produto podem aquecer quando são expostos a fontes externas de calor.

- Não exponha o produto a luz solar direta antes da utilização.



ADVERTÊNCIA!

- Antes da primeira utilização, limpe rigorosamente o produto.
- Antes de cada utilização, verifique o produto, procurando sinais de danos e assegurando que está montado de forma segura.



ATENÇÃO!

Risco de lesões

Peças não originais ou incorretas podem afetar o funcionamento e a segurança do produto.

- Utilize apenas peças originais para o produto em utilização.
- Devido a diferenças regionais, consulte o catálogo ou o site local da Invacare relativamente às opções disponíveis ou contacte o seu distribuidor Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

6.2 Etiquetas e símbolos no produto (Fig. 6)

Ⓐ	Fabricante	Ⓕ	Data de produção
Ⓑ	Conformidade Europeia	Ⓖ	Dispositivo médico
Ⓒ	Para utilização apenas em terreno plano	Ⓖ	Número de lote
Ⓓ	Ler o manual de utilização	Ⓖ	Número de referência
Ⓔ	Peso máximo do utilizador	Ⓖ	Designação do produto



A etiqueta com identificação encontra-se fixada no tubo traseiro esquerdo do produto.

7 Descrição do produto

A Invacare Cascata H720T4C é uma cadeira sanitária móvel composta por apoios de braços almofadados de plástico rebatíveis, um encosto almofadado, apoios de pés rebatíveis, uma placa de assento almofadada com abertura sanitária e quatro rodízios com trava. Permite a colocação de uma sanita com tampa por baixo do assento.

8 Material incluído na entrega (Fig. 1)

- Ⓐ Encosto
- Ⓑ Apoio de braço (2x) (previamente montado)
- Ⓒ Estrutura de assento com rodízios giratórios e suporte para a sanita com sanita
- Ⓓ Apoio de pés (2x)
- Ⓔ Parafuso com cabeça em estrela (2x)
- Ⓕ Manual de utilização

9 Utilização prevista

Este produto destina-se a ser utilizado como um acessório de sanita, proporcionando uma posição de assento estável utiliza a sanita.

Os utilizadores previstos são adultos e adolescentes com mobilidade restrita ou limitada (por exemplo, pernas e/ou ancas). Se for utilizado sem um assistente, os utilizadores devem ser capazes de manter o equilíbrio.

Indicação

Mobilidade restrita ou limitada (por exemplo, pernas e/ou ancas) ou problemas de equilíbrio ao pôr-se de pé ou caminhar devido a incapacidades transitórias ou permanentes.

Não existem nenhuma contra-indicações conhecidas quando o produto é utilizado da forma prevista.

O peso máximo do utilizador: 130 kg

10 Montar o produto (Fig. 2 – 5)



ATENÇÃO!




Risco de apresamento

- Tenha cuidado durante a montagem.

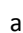

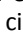
1. Oriente o tubo do encosto Ⓒ em ambos os lados, desde a parte superior até à estrutura de assento. (Fig 2) Ⓐ.
2. Aperte o parafuso com cabeça em estrela Ⓔ (aperte à mão). (Fig. 3)
3. Rebata os apoios de braços Ⓑ em ambos os lados para cima até o pino de mola Ⓖ encaixar no orifício do bloqueio Ⓖ da estrutura de assento. (Fig 3)

**ATENÇÃO!****Risco de queda**

– Certifique-se de que o pino de mola encaixa em ambos os lados com um clique.

4. Insira os apoios de pés  em ambos os lados, através dos orifícios laterais  dos pinos de fixação . (Fig 4)
5. Rebata ambos os apoios de pés para a frente.



Ajustar a altura dos apoios de pés (Fig. 5)

1. Puxe a alavanca  para cima e solte o apoio de pés levantando-o para cima.
2. Desaperte o parafuso com porca  com uma chave Allen e desloque a parte inferior dos apoios de pés  para cima ou para baixo. Aperte a porca de novo.
3. Volte a colocar o apoio de pés ao proceder pela ordem inversa.

O dispositivo é desmontado seguindo o processo inverso ao da montagem.

11 Utilização

Libertar os apoios de braços

1. Retire o parafuso de mola . O apoio de braço é libertado da sua fixação  e rebatido para baixo. (Fig. 3)

Transferir de e para a cadeira

**ATENÇÃO!****Risco de apresamento/esmagamento**

Todos os bloqueios dos rodízios são acionados pelos pés.

– Não acione os bloqueios de rodízios com as mãos.

1. Trave o bloqueio do rodízio pisando na extremidade traseira do pedal até engatar.
2. Rebata os apoios de pés para cima.
3. Alternativa ao passo 2: pressione a alavanca preta para rebater os apoios de pé para o lado. (Fig. 5)

**ADVERTÊNCIA!****Risco de deslizar e rolar**

– Prenda os rodízios com alavancas utilizando as alavancas de pé antes de sentar ou levantar da cadeira sanitária e quando se encontra na posição de estacionamento.

**ADVERTÊNCIA!****Risco de basculação!**

– Rebata os apoios de pés lateralmente ou dobre as placas de pé para cima antes de se sentar ou levantar.

Inserir/remover a sanita



A sanita pode ser inserida/removida com ou sem tampa.

1. Insira o aro superior da sanita pelo lado traseiro entre o assento e os suportes que se encontram por baixo do assento.



Para remover a sanita, repita o passo 1 pela ordem inversa.



A sanita pode ser levantada e transportado pela respetiva pega.

12 Manutenção

12.1 Informações gerais sobre manutenção

Se as instruções de limpeza e desinfeção forem cumpridas, este produto não necessita de manutenção.

12.2 Limpeza e desinfeção

Informações gerais de segurança

**ATENÇÃO!****Risco de contaminação**

– Tome precauções pessoais e utilize equipamento de proteção apropriado.

**IMPORTANTE!**

Métodos ou fluidos errados podem prejudicar ou danificar o produto.

- Todos os agentes de limpeza e desinfetantes utilizados devem ser eficazes, compatíveis entre si e passíveis de proteger os materiais aos quais são aplicados para limpeza.
- Nunca utilize líquidos corrosivos (alcalinos, ácidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos. Recomendamos um agente de limpeza doméstico normal, como detergente da loiça, se não houver especificações em contrário nas instruções de limpeza.
- Nunca utilize um solvente (diluyente celulósico, acetona, etc.) que altere a estrutura do plástico ou dissolva as etiquetas afixadas.
- Certifique-se sempre de que o produto está completamente seco antes de o pôr novamente em funcionamento.

Intervalos de limpeza

**IMPORTANTE!**

A limpeza e a desinfeção regulares melhoram o funcionamento correto, aumentam a vida útil e evitam a contaminação.

Limpe e desinfete o produto

- regularmente enquanto está a ser utilizado,
- antes e depois de qualquer operação de assistência,
- depois de ter estado em contacto com quaisquer fluidos corporais
- e antes da sua utilização por um novo utilizador.

Instruções de limpeza

**IMPORTANTE!**

- Limpar à mão
- Temperatura máxima de limpeza de 60 °C

1. Limpe o produto passando por todas as superfícies que estão geralmente acessíveis.
2. Seque as peças com um pano.

Instruções de desinfeção

Método: Siga as notas de aplicação para o desinfetante utilizado e desinfete todas as superfícies acessíveis com toalhetes.

Desinfetante: Desinfetante doméstico comum.

Secar: Deixe o produto secar ao ar.

13 Recondicionamento

Este produto é adequado para reutilização. Para o recondicionamento do produto para um novo utilizador, execute as seguintes ações:

- Inspeção
- Limpeza e desinfecção

Para obter informações detalhadas, consulte a secção 12 *Manutenção, página 20*.

Certifique-se de que o manual de utilização é fornecido com o produto.

Se forem detetados danos ou avarias, não reutilize o produto.

14 Eliminação

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da respetiva vida útil através das instalações de reciclagem existentes.

Desmonte o produto e os seus componentes, para que os diferentes materiais possam ser separados e reciclados individualmente.

A eliminação e a reciclagem de produtos utilizados e da embalagem devem cumprir as leis e os regulamentos relativos à gestão de resíduos de cada país. Para obter informações, contacte a empresa de gestão de resíduos local.

15 Dados técnicos (Fig. 7)

Dimensões			
Ⓐ	445 mm	ⓐ	750 mm
Ⓑ	455 mm	ⓑ	400 – 510 mm
Ⓒ	490 mm	ⓒ	425 mm
Ⓓ	580 mm	ⓓ	510 mm
Ⓔ	930 mm	ⓔ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Largura, abertura na placa de assento	205 mm
Ⓖ	620 mm	Profundidade, abertura na placa de assento	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ Rodízios	127 mm (5")

Pesos	
Cadeira sanitária Cascata H720T4C	15,2 kg
Peso máximo do utilizador	130 kg

Materiais			
Ⓛ	Aço lacado	ⓂⓎⓏ	PVC (policloreto de vinilo)
Ⓟ	PP (polipropileno)		

Todos os componentes do produto são resistentes à corrosão e não contêm látex de borracha natural.

16 Parâmetros ambientais

Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	10 - 40 °C

Humidade relativa	15% - 93%, sem condensação
Condições de transporte e armazenamento	
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Humidade relativa	30% - 75%, sem condensação

nl

1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de juiste versie hebt. U vindt een pdf-bestand met de laatste versie op de Invacare-website.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u een pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

2 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

3 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merkteken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse I. De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-conformiteitsverklaring.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

3.1 Productspecifieke normen

Het product is getest en voldoet aan de norm EN 12182 (producten ter ondersteuning van personen met een handicap) en alle bijbehorende normen. Neem voor meer informatie over de lokale normen en voorschriften contact op met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

4 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is drie jaar bij dagelijks gebruik en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

5 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik
- Normale slijtage
- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen
- Niet-geautoriseerde wijzigingen en/of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen

6 Veiligheid

6.1 Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of schade

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamelijk letsel.

- Als u de waarschuwingen, aanwijzingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met een professionele zorgverlener of leverancier voordat u dit hulpmiddel gebruikt.
- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur alleen als u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, met inbegrip van de gebruikershandleiding, de servicehandleiding of het instructieblad die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt.



WAARSCHUWING!

Risico op vallen!

- Niet gebruiken indien defect.
- Voer geen niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen uit op het product.
- Niet onder de douche gebruiken.
- Het product uit de buurt houden van open vuur.
- Geen smeulende sigaretten op het product leggen.
- Niet op dit product staan.
- Niet als klimhulpmiddel gebruiken.
- Het product bij belasting niet optillen.
- Gebruik de toiletstoel alleen op een vlakke ondergrond en binnenshuis.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen!

- Ga nooit op de voetsteunen staan.
- Leun niet te ver voorover.



LET OP!

Risico op verbranding van de huid!

De onderdelen van het product kunnen heet worden bij blootstelling aan een externe verwarmingsbron.

- Stel het product vóór gebruik niet bloot aan direct zonlicht.



WAARSCHUWING!

- Vóór het eerste gebruik moet het product grondig worden gereinigd.
- Controleer het product vóór elk gebruik op schade en controleer of het stevig is gemonteerd.



LET OP!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Niet-originele of verkeerde onderdelen kunnen de werking en veiligheid van het product nadelig beïnvloeden.

- Gebruik alleen originele onderdelen voor het product dat u gebruikt.
- Vanwege de verschillen per regio kunt u het beste de Invacare-catalogus of -website voor uw regio raadplegen om te zien welke opties beschikbaar zijn. U kunt ook contact opnemen met uw Invacare-leverancier. Zie de adressen achter in dit document.

6.2 Labels en symbolen op het product (afb. 6)

(A)	Fabrikant	(F)	Productiedatum
(B)	Conformiteit met Europese normen	(G)	Medisch hulpmiddel
(C)	Alleen voor gebruik op een vlakke ondergrond	(H)	Serienummer
(D)	Lees de gebruikershandleiding	(I)	Referentienummer
(E)	Maximaal gebruikersgewicht	(J)	Productaanduiding



De identificatie is bevestigd aan de achterste buis aan de linkerzijde van het product.

7 Productbeschrijving

De Invacare Cascata H720T4C is een mobiele toiletstoel met neerklapbare, beklede armsteunen, een beklede rugleuning, wegklapbare voetsteunen, een beklede zitplaat met toiletopening en vier zwenkwielen met rem. Onder de zitting kan een ondersteek met deksel worden geplaatst.

8 Geleverde onderdelen (afb. 1)

- (A) Rugleuning
- (B) Armsteun (2x) (vooraf gemonteerd)
- (C) Zitframe met zwenkwielen en ondersteekhouder met ondersteek
- (D) Voetsteun (2x)
- (E) Sterschroef (2x)
- (F) Gebruikershandleiding

9 Beoogd gebruik

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt als toilethulpmiddel voor een stabiele zitpositie bij het naar het toilet gaan.

Het product is bedoeld voor jongeren en volwassenen met beperkte bewegingsmogelijkheden (bijv. van de benen en/of heupen). Indien het hulpmiddel zonder begeleiding wordt gebruikt, moet de gebruiker zijn/haar evenwicht kunnen bewaren.

Indicatie

Beperkte bewegingsmogelijkheden van bijvoorbeeld benen en/of heupen, of evenwichtsproblemen bij het opstaan of lopen als gevolg van een tijdelijke of permanente handicap.

Er zijn geen contra-indicaties bekend bij gebruik van het product zoals bedoeld.

Het maximale gebruikersgewicht: 130 kg

10 Montage van het product (afb. 2 - 5)



LET OP!

Knellingsgevaar

– Wees voorzichtig tijdens het monteren.

1. Voer de rugbuis © aan beide zijden van bovenaf in het zitframe. (afb. 2) Ⓐ
2. Draai de sterschroef Ⓔ met de hand goed vast. (afb. 3)
3. Draai de armsteunen Ⓑ aan beide zijden omhoog tot de veerpen ① in het gat van de vergrendeling ① op het zitframe springt. (afb. 3)



LET OP!

Risico op vallen

– Zorg dat de veerpen aan beide zijden hoorbaar vastklikt.

4. Plaats de voetsteunen Ⓓ aan beide zijden in de bevestigingspinnen Ⓖ, via de gaten aan de zijkanten Ⓚ. (afb. 4)
5. Draai beide voetsteunen naar voren.

De hoogte van de voetsteunen aanpassen (afb. 5)

1. Trek de hendel © omhoog en maak de voetsteun los door deze omhoog te tillen.
2. Draai de schroef en moer Ⓜ los met een inbussleutel en schuif het onderste deel van de voetsteunen Ⓝ naar boven of beneden. Draai de moer weer vast.
3. Plaats de voetsteun terug door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Demonteer het product door de installatieprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

11 Gebruik

De armsteunen losmaken

1. Trek aan de knop van de veerpen ①. De armsteun komt los uit de bevestiging ① en draait naar beneden. (afb. 3).

Verplaatsing van en naar de stoel



LET OP!

Beknellingsgevaar

Alle remmen van de zwenkwielen worden met de voet bediend.
– Rem de zwenkwielen niet met de hand.

1. Vergrendel het zwenkwiel door met uw voet op het achterste deel van het pedaal te duwen totdat het vastklikt.
2. Klap de voetsteunen omhoog.
3. Alternatief voor 2: druk op de zwarte hendel om de voetsteunen opzij te draaien. (afb. 5).



WAARSCHUWING!

Risico op uitglijden en weggrollen

– Vergrendel alle zwenkwielen met hendels met de voetsluitingen voordat iemand plaatsneemt of opstaat, of als de toiletstoel geparkeerd staat.



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen!

– Draai de voetsteunen naar de zijkant of klap de voetplaten omhoog voordat iemand plaatsneemt in of opstaat uit de rolstoel.

De ondersteek plaatsen/verwijderen



De ondersteek kan met of zonder deksel worden geplaatst/verwijderd.

1. Plaats de bovenste rand van de ondersteek vanaf de achterkant tussen de zitting en de beugels onder de zitting.



Herhaal stap 1 in omgekeerde volgorde om de ondersteek te verwijderen.



De ondersteek kan worden opgetild en aan de handgreep worden gedragen.

12 Onderhoud

12.1 Algemene informatie over onderhoud

Als de instructies voor schoonmaak en desinfectie in acht worden genomen, heeft dit product geen onderhoud nodig.

12.2 Reiniging en desinfectie

Algemene veiligheidsinformatie



LET OP!

Besmettingsgevaar

– Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.



BELANGRIJK!

Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.

- Alle gebruikte reinigungs- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
- Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen. We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
- Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
- Zorg altijd dat het product volledig droog is voordat u het weer in gebruik neemt.

Reinigingsintervallen



BELANGRIJK!

Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting.

Reinig en desinfecteer dit product

- regelmatig als het wordt gebruikt;
- voor en na onderhoudswerkzaamheden;
- als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
- voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

Reinigingsinstructies



BELANGRIJK!

- Met de hand reinigen
- Maximale reinigingstemperatuur is 60 °C

1. Reinig het product door alle goed bereikbare oppervlakken af te nemen.
2. Droog de onderdelen met een doek.

Instructies voor desinfecteren

Methode: volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het gebruikte desinfectiemiddel op en neem alle toegankelijke oppervlakken af.

Desinfectiemiddel: een standaard desinfectiemiddel voor huishoudelijk gebruik.

Drogen: laat het product aan de lucht drogen.

13 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:

- Inspectie
- Schoonmaken en desinfecteren

Zie 12 *Onderhoud*, pagina 23 voor gedetailleerde informatie.

Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding samen met het product wordt overhandigd.

Hergebruik het product niet als er schade of afwijkingen zijn geconstateerd.

14 Afvoeren

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

15 Technische gegevens (afb. 7)

Afmetingen			
Ⓐ	445 mm	Ⓛ	750 mm
Ⓑ	455 mm	Ⓜ	400 – 510 mm
Ⓒ	490 mm	Ⓨ	425 mm
Ⓓ	580 mm	Ⓦ	510 mm
Ⓔ	930 mm	Ⓩ	460 mm
Ⓕ	975 mm	Breedte, uitsparing in zitplaat	205 mm
Ⓖ	620 mm	Diepte, uitsparing in zitplaat	264 mm
Ⓗ	160 mm	∅ zwenkwielen	127 mm (5")

Gewichten	
Toiletstoel Cascata H720T4C	15,2 kg
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg

Materialen			
Ⓛ	Staal, met poedercoating	Ⓜ Ⓨ Ⓦ	PVC
Ⓩ	PP		

Alle onderdelen van het product zijn roestbestendig en bevatten geen natuurrubberlatex.

16 Omgevingsparameters

Bedrijfsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	10 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	15% - 93%, zonder condensvorming
Voorschriften voor opslag en transport	
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30% - 75%, zonder condensvorming

Invacare distributors:

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

España:

Invacare SA
Avda. Del Oeste n.50, 1ª, 1ª
Valencia-46001
Tel: (34) (0)972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900
Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

USA:

Clarke Health Care Products
7830 Steubenville Pike
Oakdale, PA 15071, USA
Toll Free: (888) 347-4537
Phone: (724) 695-2122
Fax: (724) 695-2922
info@clarkehealthcare.com
www.clarkehealthcare.com

Canada:

Invacare Canada L.P.
570 Matheson Blvd East, Unit
8
CDN Mississauga, On. L4Z 4G4
Phone: (905) 890 8300
Toll Free: 800.668.5324
www.invacare.ca

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks
6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

**Eastern Europe, Middle East
& CIS:**

Invacare EU Export
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 397
eu-export@invacare.com
www.invacare-eu-export.com

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Ireland:

Invacare Ireland Ltd,
Unit 5 Seatown Business
Campus
Seatown Road, Swords, County
Dublin
Tel : (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com
www.invacare.ie

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee-Tiefgraben
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Germany

Deutschland:

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
www.invacare.it

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 193 360
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

United Kingdom:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

